


产品结构

PRODUCT STRUCTURE

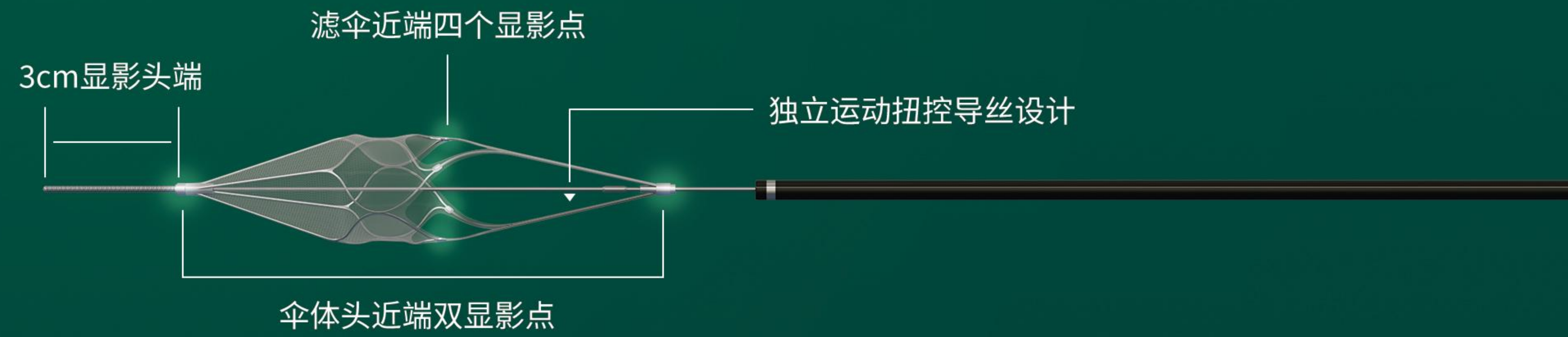

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

远端栓塞保护器 规格:

规格型号	滤伞直径	产品总长度	适配血管范围	推送导丝直径
601000030	3mm	190cm	1.5-2.5mm	0.014inch
601000050	5mm	190cm	2.5-4.8mm	0.014inch
601000070	7mm	190cm	4.0-6.5mm	0.014inch

· 该产品作为保护装置，在治疗颈动脉狭窄的支架成形术中，用于捕获和移除脱落血栓或脱落斑块，为患者提供防止远端血管栓塞的保护。

输送导管 规格:

规格型号	远端内径	远端外径	快速交换口距离头端长度	长度
601000030	0.039"/1.0mm	0.047"/1.2mm	24.5cm	133cm
601000050				
601000070				

回收导管 规格:

规格型号	远端内径	远端外径	远端外管长度	长度
601000030	0.047"/1.2mm	0.059"/1.5mm	30cm	152cm
601000050				
601000070				



苏州中天医疗器械科技有限公司

地址：苏州工业园区车坊东堰里路21号生物医药产业园5期6号楼

电话：86-0512-69138730

邮箱：Information@zenithmedtech.com

网址：Zenithmedtech.com




中天天宓®远端保护器

Zenith Embolic Protection System

国械注准 20233031304

创新科技

让血管治疗更简单

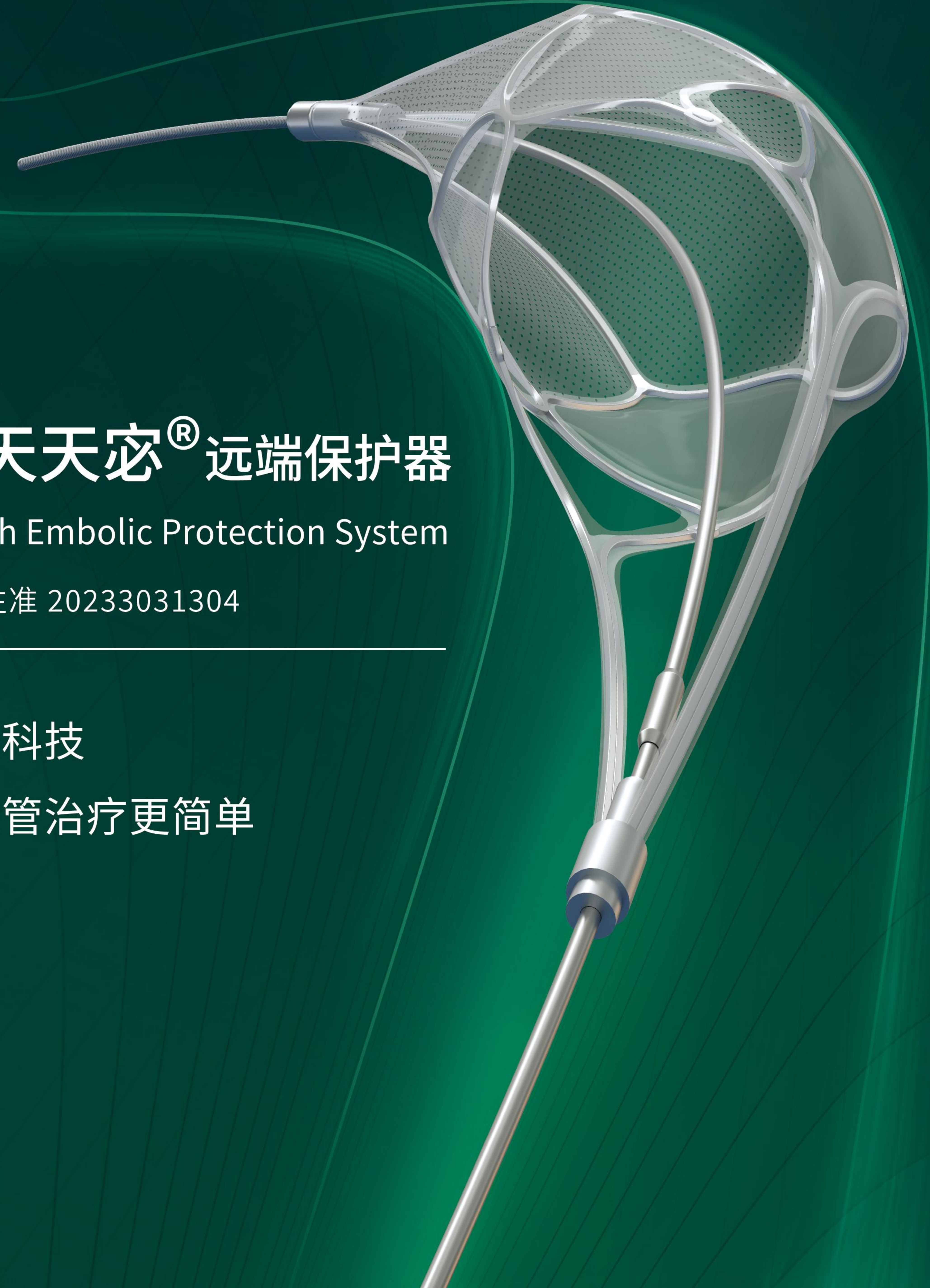

中天天心®远端保护器

一网无遗、稳定贴壁、灵巧穿行



01【稳定贴壁】同心圆镍钛支柱和外展大网孔

● 滤伞近端四个显影点
为术中伞体打开提供良好的可视性。

● 近端同心圆镍钛支柱和外展大网孔设计
提供极佳的滤伞贴壁性。


02 多种规格型号

- 伞体直径3-7mm可选，适用不同血管直径，满足各种临床手术需求。

03【灵巧穿行】独立运动扭控导丝设计

- 允许导丝进行一定幅度的扭控和推送运动，保证滤伞操作稳定性，避免滤伞发生位移，降低血管痉挛风险。
- 独立导丝可先行通过复杂狭窄病变区域，易于后续保护伞通过到位，降低潜在斑块脱落风险。

04【一网无遗】高分子材料滤伞设计

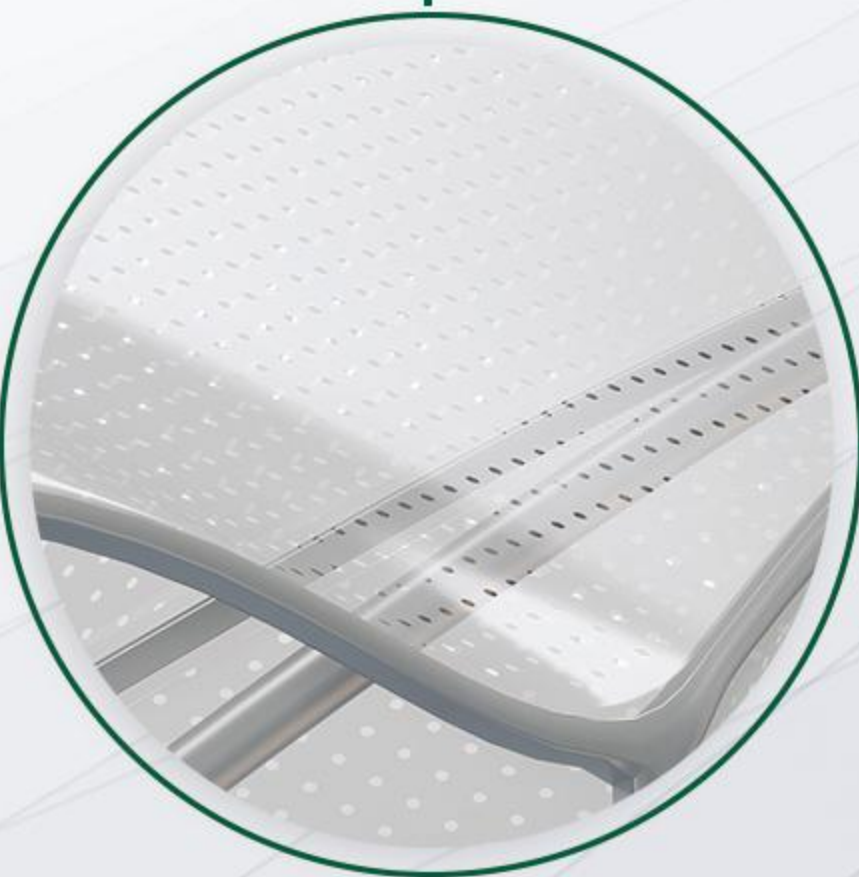

- 采用高分子材料滤伞设计，提供极佳的柔软性和生物相容性。

● 环形渐变滤网孔径，保持前向血流的同时具有优异的
栓子捕获能力，降低术中术后并发症的风险。

