


## 产品结构

PRODUCT STRUCTURE

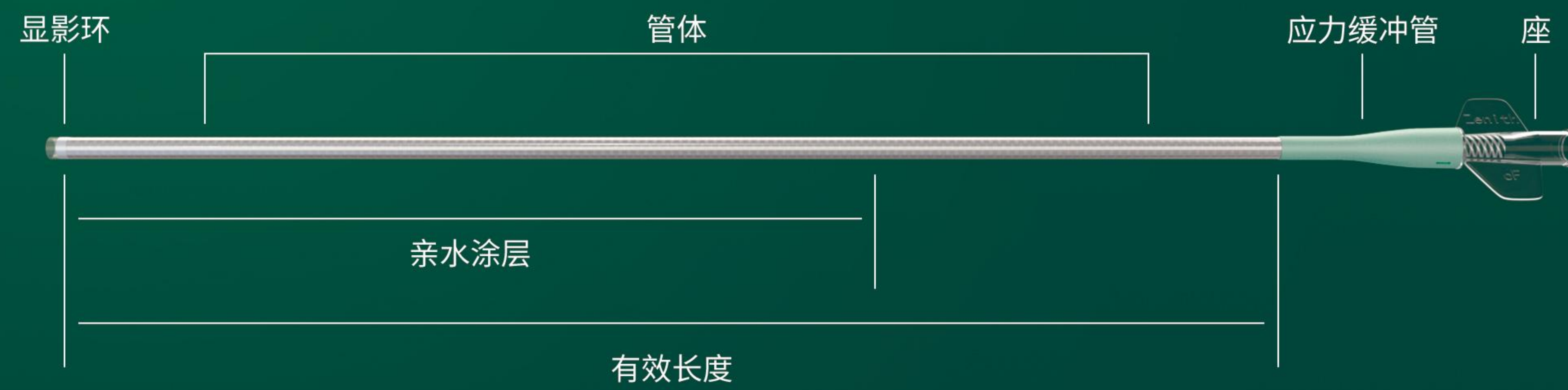

## 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

规格型号	外径	内径	最大适配导丝	长度
B4555115	5F	0.055"	≤0.035"	115cm
B4555125	5F	0.055"	≤0.035"	125cm
B4555133	5F	0.055"	≤0.035"	133cm
B4670105	6F	0.070"	≤0.035"	105cm
B4670115	6F	0.070"	≤0.035"	115cm
B4670125	6F	0.070"	≤0.035"	125cm
B4670133	6F	0.070"	≤0.035"	133cm

• 适用于在症状发作后八小时内，继发于颅内大血管闭塞的急性缺血性脑卒中患者的血运重建。



# 中天天巡® Pro血栓抽吸导管

## Zenith Aspiration Catheter

国械注准 20223031222



苏州中天医疗器械科技有限公司

地址：苏州工业园区车坊东堰里路21号生物医药产业园5期6号楼

电话：86-0512-69138730


邮箱：Information@zenithmedtech.com

网址：Zenithmedtech.com

创新科技 让血管治疗更简单

# 中天天巡<sup>®</sup> Pro 血栓抽吸导管

直面大吸力，抽吸更随心

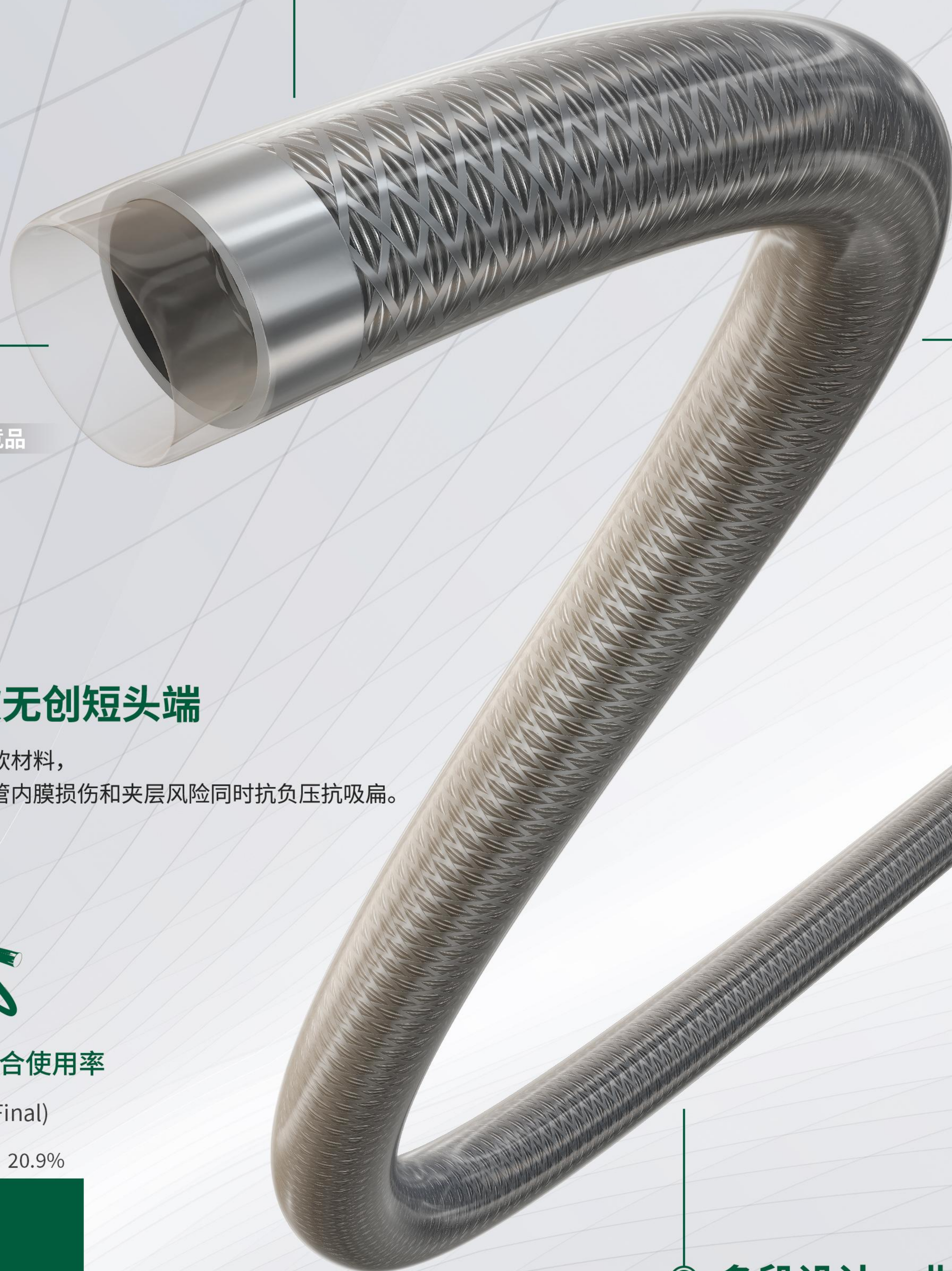

## 腔大壁薄，兼容并包

内径0.070 inch，增大血栓接触面积，提高抽吸成功率且可容纳多种器械。

## 双层金属交叉绕簧编织

多种高分子及金属材料复合设计，优化编织结构，提供极佳的远端到位性、近端支撑性和抗折抗扭结性。


## 超软无创短头端

特殊柔软材料，降低血管内膜损伤和夹层风险同时抗负压抗吸扁。

## 多段设计，曲径通幽

14段渐变式平滑过渡设计，硬度渐变，推送传递更平稳顺畅。

中天天巡<sup>™</sup> 国外竞品

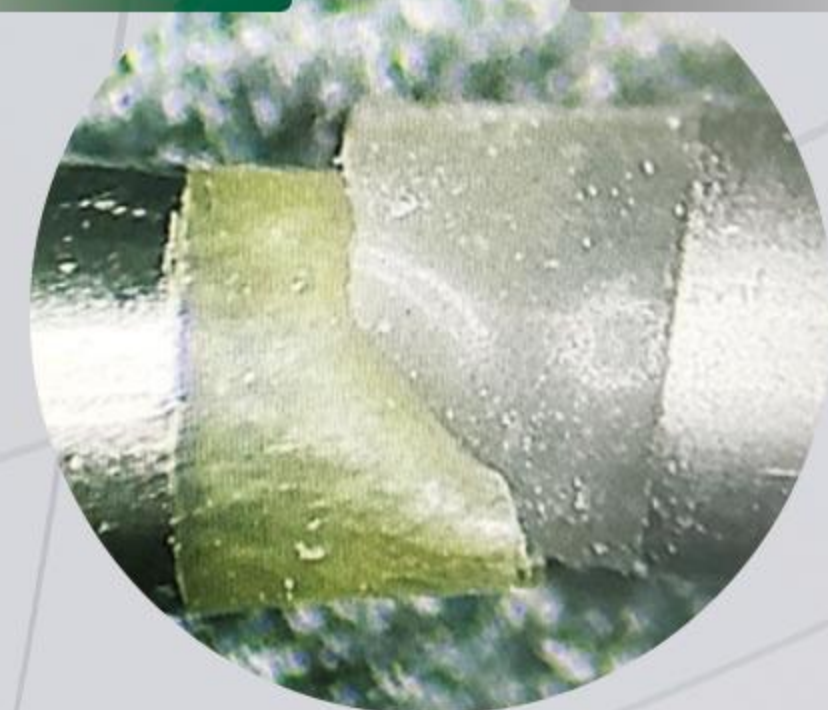


## 临床数据

CLINICAL DATA

血管开通支架联合使用率

mTICI 2b/3(Final)

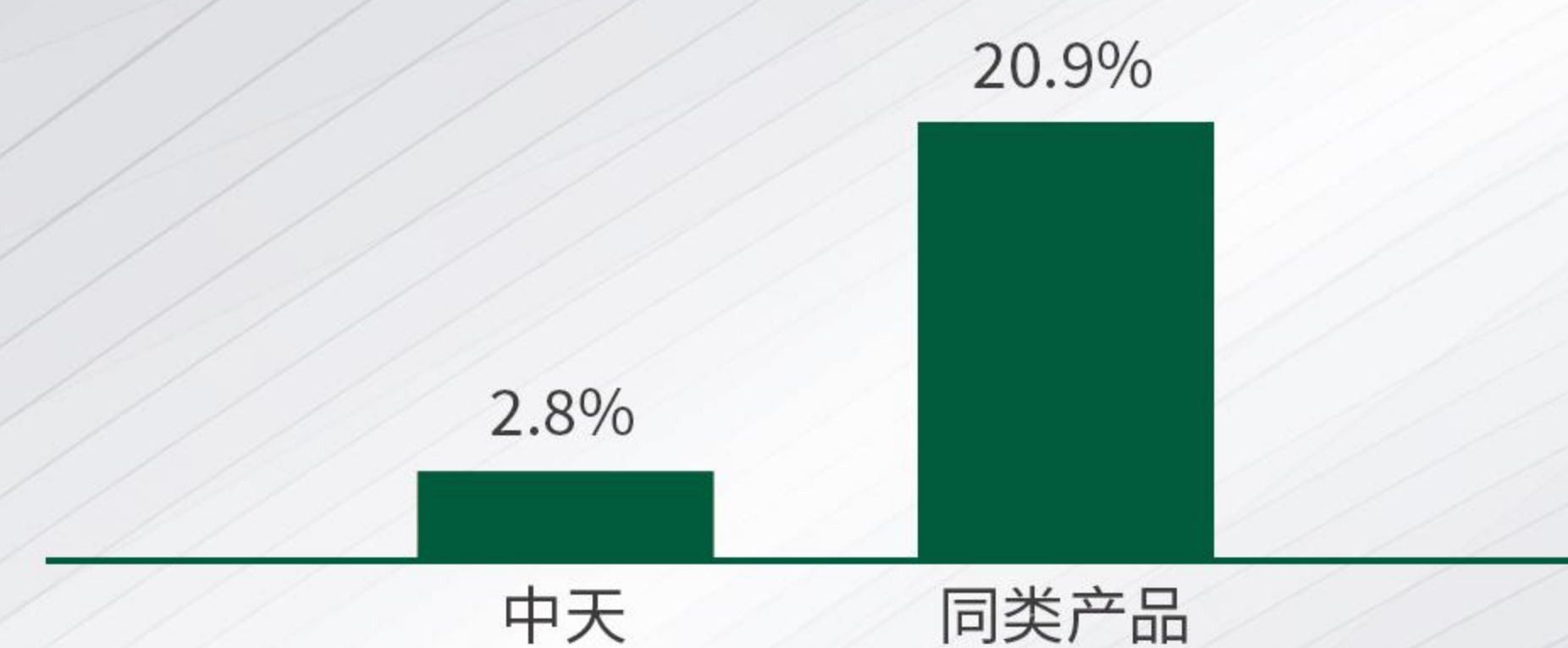

\*本数据来源为“评价血栓抽吸导管安全性和有效性的临床试验”

## 血栓抽吸装置

- 稳定抽吸  
负压值80-85kPa  
瞬时抽气速率15L/min ± 4L/min
- 抽吸可视  
收集罐自带过滤网  
实时观察血栓抽出情况
- 优化结构设计  
体积更小 重量更轻 携带方便

